

MANUAL DE USUARIO TECNIPÉS

Scout SJX

Guía del usuario · Instalación,
funcionamiento y mantenimiento.



1. Información sobre seguridad

Señal	Significado
ADVERTENCIA	Situaciones peligrosas de mediano riesgo que podrían ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.
PRECAUCIÓN	Situaciones peligrosas de bajo riesgo que podrían ocasionar lesiones, daños materiales o pérdida de información del dispositivo.
ATENCIÓN	Información importante sobre el producto.
NOTA	Información útil sobre el producto.

Señales de advertencia



Peligro.



Descarga eléctrica.

Medidas de seguridad



ADVERTENCIA: lea todas las instrucciones de seguridad antes de instalar, hacer conexiones o dar servicio a este equipo. El incumplimiento de estas advertencias puede causar lesiones personales y/o daños materiales. Conserve las instrucciones para futuras consultas.

- Verifique que el voltaje local de la fuente de alimentación esté dentro del rango de voltaje impreso en la etiqueta del adaptador de CA del equipo.
- Conecte el adaptador de CA a una toma de tierra compatible.
- Coloque el equipo de forma que el adaptador de CA pueda desconectarse fácilmente de la toma de corriente.

- Coloque el cable de alimentación de manera que no represente un obstáculo con peligro de tropiezos.
- Utilice el equipo únicamente bajo las condiciones ambientales especificadas en las instrucciones de uso.
- No utilice el equipo en entornos peligrosos o explosivos.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica antes de la limpieza o el mantenimiento.
- El servicio debe ser realizado por personal autorizado.

Uso apropiado

Utilice el equipo exclusivamente para los fines descritos en el manual. Cualquier otro tipo de uso y/o funcionamiento que exceda los límites de las especificaciones técnicas sin el consentimiento por escrito del fabricante se considera uso inapropiado.


Este equipo cumple los estándares de la industria y las normas actuales de seguridad reconocidas; sin embargo, puede constituir un peligro durante su uso.

Si el equipo no se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, su seguridad puede verse afectada, por lo que el fabricante no asume ninguna responsabilidad.

2. Instalación


2.1 Elección de la ubicación. El lugar debe ser firme, plano y estar nivelado. Evite vibraciones excesivas, fuentes de calor, corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura. Deje suficiente espacio libre alrededor del aparato.

2.2 Liberación del bloqueo de transporte

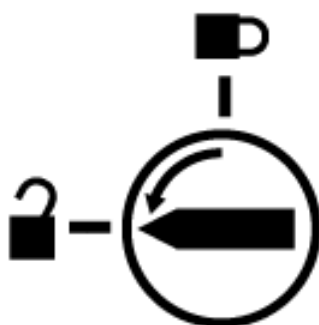

En la parte superior de la balanza, gire el indicador 90° hacia la izquierda. La calibración, el ajuste y la configuración técnica de este equipo los realiza el servicio técnico de TecnIPés. Contacte con nosotros por teléfono al 93 531 80 74 o por WhatsApp al 648 907 518.


2.3 Instalación de componentes

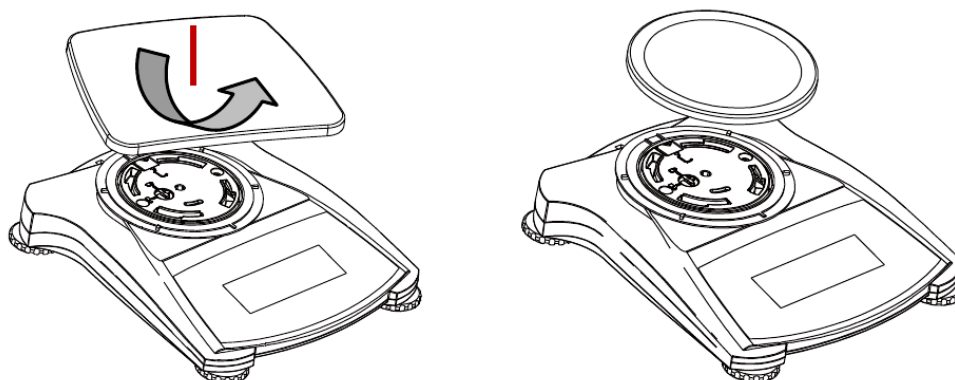

Para SJX/E: coloque el plato rectangular dentro del plato inferior, como se indica en la figura, y gírelo hacia la izquierda hasta que quede bloqueado. Los platos redondos se colocan directamente en el plato inferior, hacia abajo.

Para SJX: instale el plato de acero inoxidable directamente en la plataforma inferior.

2.4 Nivelación del aparato

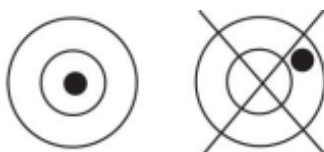

Nivele el equipo ajustando las patas de nivelación hasta que la burbuja del indicador de nivel quede centrada dentro del círculo. Asegúrese de que el equipo esté nivelado cada vez que cambie su ubicación.

La figura izquierda representa la burbuja centrada; la figura derecha tachada representa una nivelación incorrecta.


2.5 Conexión a la red eléctrica

Instalación del adaptador de CA. Conecte el cable de alimentación del adaptador de CA al conector de entrada de alimentación del equipo y después conecte el enchufe de CA a una toma eléctrica adecuada.




ATENCIÓN: utilice únicamente un adaptador de CA especificado por el fabricante.

Parte posterior

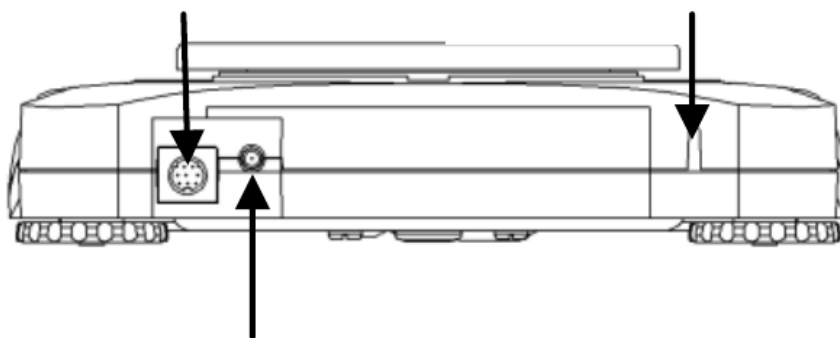

Flecha izquierda superior: interfaz opcional. Flecha izquierda inferior: conector de entrada para el adaptador de CA. Flecha derecha: ranura de seguridad antirrobo.

Parte inferior

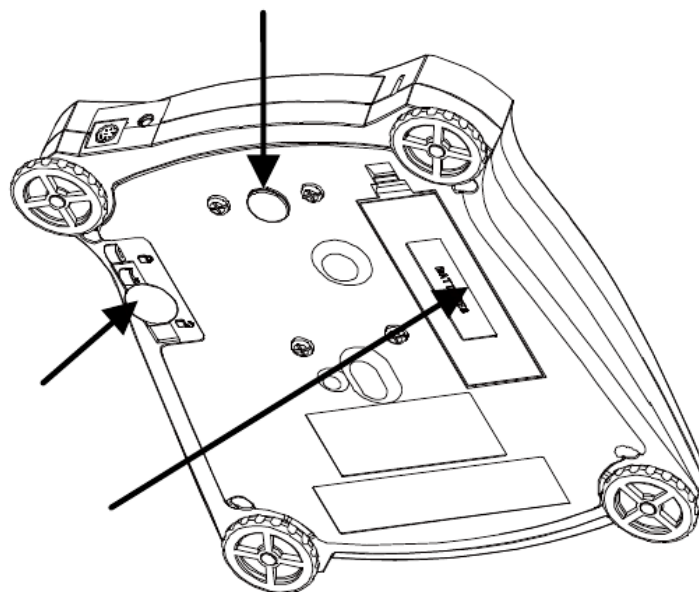

Flecha superior: orificio de pesaje debajo de la balanza. Flecha izquierda: interruptor de seguridad. Flecha inferior: cubierta del compartimento de las pilas.


Instalación de baterías

Instale cuatro pilas AA con la polaridad que se muestra en el compartimento de las pilas.

2.6 Calibración inicial

La calibración, el ajuste y la configuración técnica de este equipo los realiza el servicio técnico de TecnIPés. Contacte con nosotros por teléfono al 93 531 80 74 o por WhatsApp al 648 907 518.

3. Funcionamiento

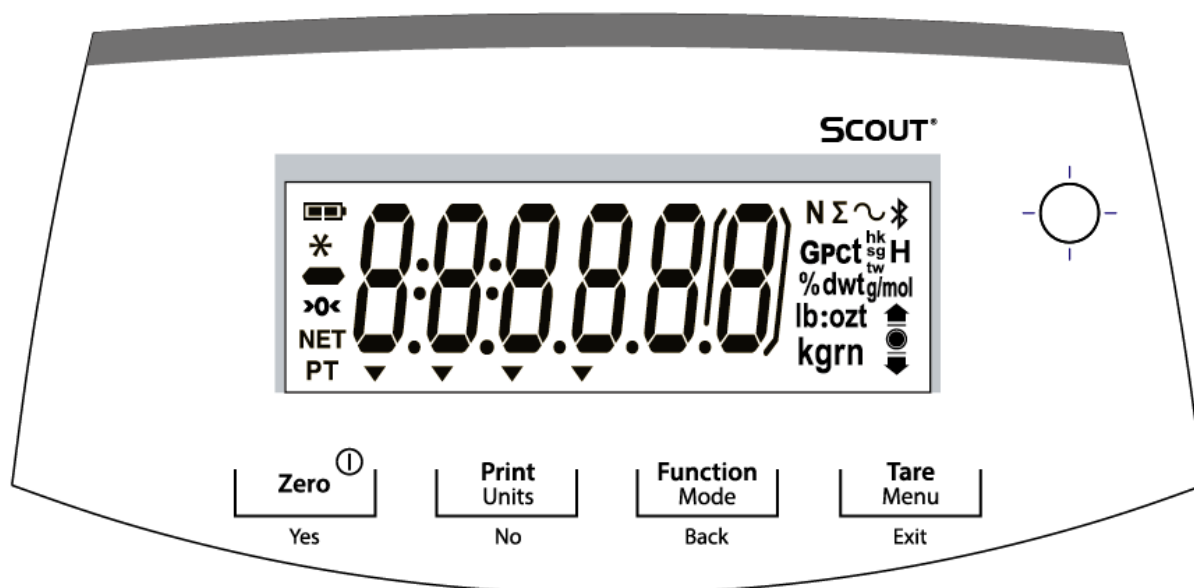

3.1 Pantalla de visualización, pantalla de inicio.

Botones de control

Botón	Pulsación corta	Pulsación larga	Pulsación corta en el menú
Zero	Zero/On: enciende la balanza; si está encendida, la pone a cero.	Off: apaga la balanza.	Yes: acepta el ajuste actual.
Print / Units	Print: inicia la impresión.	Units: cambia la unidad de pesaje.	No: avanza al siguiente menú o ajuste.
Function / Mode	Function: inicia un modo de la aplicación.	Mode: cambia el modo de la aplicación.	Back: pasa al elemento anterior del menú.
Tare / Menu	Tare: tara.	Menu: abre el menú de usuario.	Exit: permite salir del menú de usuario.

3.2 Estructura del menú

Las opciones se identifican por sus nombres de pantalla; la descripción indica su función.

C.a.I

La calibración, el ajuste y la configuración técnica de este equipo los realiza el servicio técnico de TecníPés. Contacte con nosotros por teléfono al 93 531 80 74 o por WhatsApp al 648 907 518.

S.E.t.U.P

Opción	Descripción
Reset	Resetear.
Filter	Filtrar.
AZT	AZT.
StableRange	Estabilidad/rango.
Backlight	Luz de fondo.
Auto Tare	Tara automática.
Auto Off	Apagado automático.
End	Fin.

M.o.d.E

Opción	Descripción
Reset	Resetear.
Weighing	Pesaje.
Counting	Recuento.
Percent	Porcentaje.

Opció	Descripció
Check	Comprobar.
Totalize	Totalizar.
Density	Densidad.
Hold	Mantener.
End	Fin.

U.n.i.t**

Opció	Descripció
Reset	Resetear.
g	g
kg	kg
ct	ct
oz	oz
ozt	ozt
dwt	dwt
lb	lb
grn	grn
hkt	hkt
sgt	sgt
twt	twt
t	t
End	Fin.

E.n.d

E.n.d.

** Las unidades disponibles pueden variar en función de la normativa local.

3.3 Utilización de la balanza

NOTA: antes de usar cualquier aplicación, asegúrese de que la balanza esté nivelada y calibrada.

Aplicación de pesaje:

1. Si es necesario, coloque un recipiente vacío en el plato y pulse Tare.
2. Coloque una muestra en el plato o recipiente. La pantalla muestra el peso de la muestra colocada.

4. Mantenimiento



4.1 Limpieza.

ADVERTENCIA: peligro de descarga eléctrica. Desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo. Asegúrese de que no entre líquido en el interior del equipo.



ATENCIÓN: no utilice disolventes, sustancias químicas fuertes, amoníaco ni productos de limpieza abrasivos.

Para la superficie exterior del dispositivo puede utilizar un paño ligeramente humedecido con agua o un detergente suave.

4.2 Solución de problemas

Para cuestiones técnicas, póngase en contacto con un agente de servicio autorizado por el fabricante.

5. Datos técnicos

Los datos técnicos son válidos en las siguientes condiciones:

- Solo para uso en interiores.
- Altitud: hasta 2.000 m.
- Rango de temperatura de funcionamiento: de +5 °C a +40 °C.
- Rango de temperatura especificado para los modelos SJX y SJXE: de +10 °C a +40 °C.
- Rango de temperatura especificado para los modelos SJXM: de +10 °C a +30 °C.
- Humedad relativa: del 10 % al 80 % a 31 °C, disminuyendo linealmente hasta una humedad relativa del 50 % a 40 °C, sin condensación.
- Fluctuación del voltaje de suministro: ± 10 % del voltaje nominal.
- Categoría de instalación: II.
- Nivel de contaminación: 2.

Especificaciones

Para conocer las especificaciones del producto, consulte el manual de instrucciones completo.

6. Conformidad

La conformidad con los estándares siguientes se indica mediante la marca correspondiente en el producto.

CE



Este producto cumple las directivas de la UE 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) y 2014/31/UE (NAWI). La Declaración de Conformidad de la UE puede consultarse en la documentación del equipo.

WEEE



Este producto cumple la directiva de la UE 2002/96/CE (WEEE). Elimine el producto según las disposiciones locales, mediante el sistema de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos. Para instrucciones de eliminación en Europa, consulte la documentación del equipo.

RCM



AS/NZS 61000.6.1 y AS/NZS 61000.6.3.

Instrumentos de pesaje verificados

Los equipos usados en transacciones comerciales deben ser verificados y sellados por una entidad cualificada. Es responsabilidad del comprador asegurarse de que se cumplen todos los requisitos legales pertinentes.

Las balanzas verificadas en fábrica llevan el siguiente distintivo en la placa descriptiva.



Los instrumentos de pesaje que requieren ser verificados en dos etapas no tienen ninguna marca adicional de metrología en la placa descriptiva. La segunda etapa debe realizarse en el lugar de instalación por las autoridades de pesos y medidas aplicables.

Si las regulaciones nacionales limitan el periodo de validez de la verificación, el usuario debe seguir estrictamente el periodo de reverificación e informar a las autoridades de pesos y medidas.

Ya que los requisitos de verificación varían según la jurisdicción, el comprador debe ponerse en contacto con su oficina local de pesos y medidas si no está familiarizado con los requisitos.