

MANUAL D'USUARI TECNIPÉS

Scout STX

Guia d'inici ràpid · Balances portàtils amb pantalla tàctil.



1. Desembalatge

Retireu amb cura de l'embalatge la balança Scout i cadascun dels seus components. Deseu el material d'embalatge en un lloc segur per transportar la balança més endavant.


- Balança.
- Guia d'inici ràpid.
- Adaptador de CA i endoll.
- Plat.
- Massa de calibratge: només per als models de fins a 620 g de capacitat.
- Coberta per a l'apilament i l'emmagatzematge: no aplicable als models d'1 mg.

2. Selecció del lloc d'instal·lació

Col·loqueu la balança sobre una superfície ferma i amb prou espai. Eviteu l'excés de corrents d'aire, vibracions, fonts de calor o canvis bruscos de temperatura.


3. Preparació per a l'ús

Pas 1. Allibereu el bloqueig de transport de color vermell situat a la subplataforma de la balança. Gireu el punter 90° en sentit antihorari.

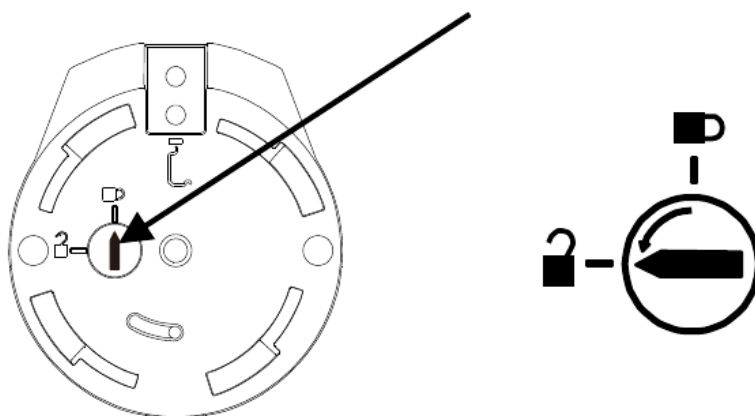

La fletxa assenjala el punter de bloqueig de transport. El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de Tecnipés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518.


Pas 2. Instal·leu el plat. Plat rectangular: col·loqueu-lo diagonalment sobre la subplataforma i gireu-lo en sentit antihorari fins que encaixi. Plat rodó: col·loqueu-lo directament cap avall sobre la subplataforma.

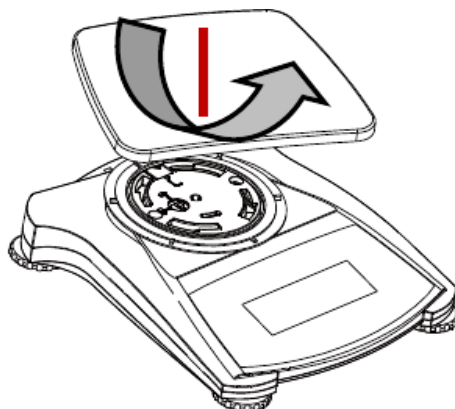

3. Preparació per a l'ús: alimentació i anivellament

Pas 3. Connecteu l'alimentació. Connecteu l'adaptador de CA al connector d'entrada de la balança.

Instal·lació de les piles: instal·leu quatre piles AA (LR6, no incloses) amb la polaritat que s'indica al compartiment de les piles. Quan funcioni amb piles, manteniu premut el botó d'encesa durant un màxim de 10 segons per engegar-la.

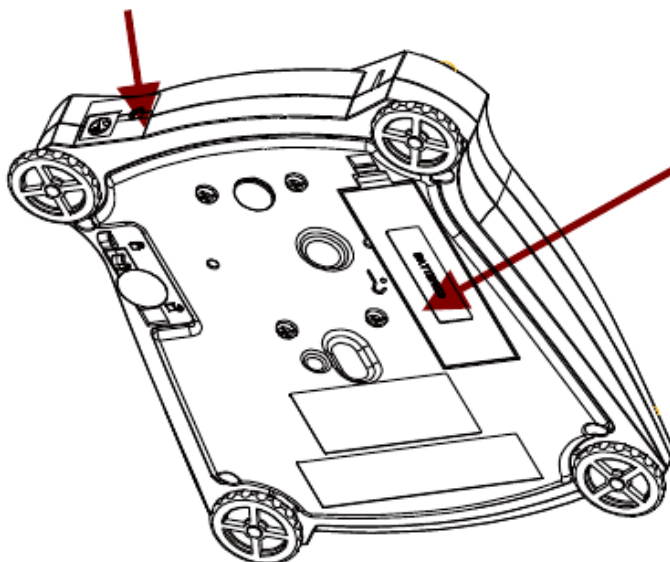

Fletxa superior: connector d'entrada de l'adaptador de CA. Fletxa dreta: compartiment de les piles.

Pas 4. Anivelleu la balança abans de l'ús ajustant les potes fins que la bombolla d'aire quedi centrada.



Pota d'anivellament de la balança.



Bombolla centrada: anivellament correcte. Bombolla fora del centre: ajusteu les potes.


4. Precaucions de seguretat



PRECAUCIÓ: Llegiu totes les advertències de seguretat abans d'instal·lar, fer connexions o reparar aquest equip. L'incompliment d'aquestes advertències pot causar lesions personals i/o danys a la propietat. Conserveu totes les instruccions per a futures consultes.

- Comproveu que la tensió de l'alimentació de CA local sigui dins del rang d'entrada imprès a l'etiqueta d'especificacions de l'adaptador de CA.
- Connecteu l'adaptador de CA únicament a una presa compatible amb connexió de terra.
- Col·loqueu l'instrument de manera que l'adaptador de CA es pugui desconnectar fàcilment de la presa d'alimentació.
- Col·loqueu el cable d'alimentació de manera que no obstaculitzi el pas de les persones ni creï perill d'ensopegades.
- Utilitzeu l'equip únicament en les condicions ambientals especificades a les instruccions de l'usuari.
- No feu funcionar l'equip en entorns peril·losos o explosius.
- Desconnecteu l'equip de la xarxa elèctrica abans de netejar-lo o fer-hi manteniment.
- Només el personal autoritzat pot reparar l'equip.

5. Controls

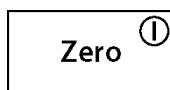


Botó Zero.



Botó Tare.

Botó	Pulsació	Funció
Zero	Breu	Engega la balança. Si la balança està engegada, ajusta el zero.
Zero	Llarga	Apaga la balança.
Tare	Breu	Tara.

Pantalla d'aplicació principal

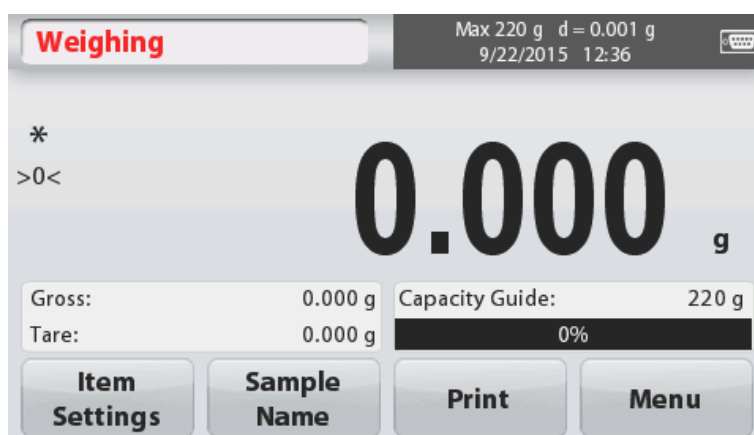

Aquesta balança utilitza una pantalla tàctil. Les àrees tàctils i els botons permeten controlar les funcions de la balança.

Zona	Descripció
Aplicació	Indica el mode d'aplicació seleccionat.
Indicadors	Estabilitat (*), net (NET), brut (G) i/o centre de zero (>0<).

Zona	Descripció
Camps de referència	Dades de referència de l'aplicació.
Capacitat i llegibilitat	Valors de capacitat i llegibilitat.
Camp de resultat	La informació varia segons l'aplicació. Toqueu g per canviar la unitat.
Botons d'aplicació	Les funcions varien segons l'aplicació.

6. Calibratge


El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de Tecnipés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518.

7. Funcionament i aplicacions



La balança es pot configurar per funcionar en diversos modes d'aplicació. Toqueu el botó superior esquerre de l'àrea d'aplicació per seleccionar el mode. Scout STX incorpora les aplicacions següents:


- Pesatge.
- Recompte de peces.
- Pesatge en percentatge.
- Pesatge dinàmic.
- Determinació de densitat.
- Pesatge de comprovació.
- Retenció del valor en pantalla.
- Totalització.
- Pesatge molar.

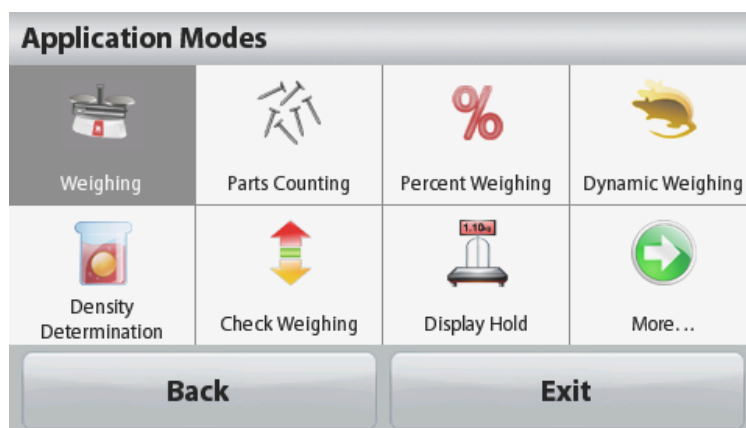

Pantalla Application Modes: selecció del mode d'aplicació.

8. Navegació pel menú i la pantalla

Tota la navegació pel menú es fa tocant la pantalla. Per accedir al menú, toqueu Menu en qualsevol pantalla d'inici d'aplicació. Apareix el menú principal, amb els botons Back (tornar enrere) i Exit (sortir). Continueu tocant l'element apropiat de la llista per desplaçar-vos pels elements del menú o premeu un botó per canviar d'ubicació.

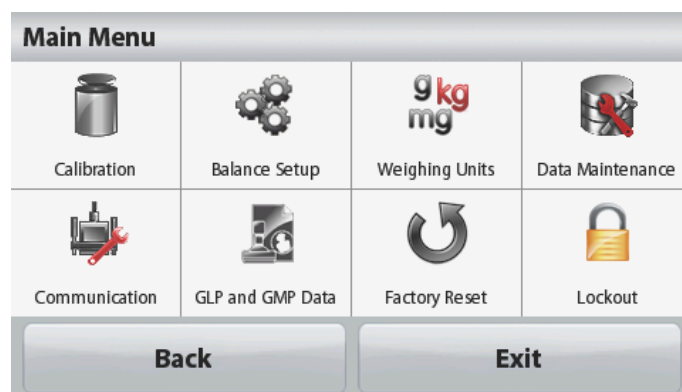

El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de Tecnipés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518.

Menú	Funció
Balance Setup · Configuració de la balança	Toqueu per veure la configuració de la balança.
Weighing Units · Unitats de pes	Toqueu per veure les unitats de pes.

Menú	Funció
Data Maintenance · Manteniment de dades	Toqueu per veure les opcions de manteniment de dades.
Communication · Comunicació	Toqueu per veure la configuració del dispositiu COM i la configuració d'impressió.
GLP and GMP Data · Dades GLP i GMP	Introduïu les dades d'usuari per a la traçabilitat.
Lockout · Bloqueig	Toqueu per accedir a la llista del menú de bloqueig.

9. Opcions addicionals


Connexió de la interfície. Utilitzeu un kit de connectivitat d'interfície opcional per connectar la balança a un ordinador, una impressora o una pantalla auxiliar del fabricant. Els kits disponibles són RS232, Host USB, Dispositiu USB, Ethernet i Bluetooth. Els kits d'interfície poden variar segons les regulacions locals.




Connexions de la part posterior, d'esquerra a dreta: connexió d'interfície, connector d'entrada de l'adaptador de CA i ranura de seguretat.

Ganxo per a pesatge penjant

El ganxo per a pesatge penjant és al revers de la tapa de les piles. Per utilitzar aquesta funció, retireu la tapa protectora de color vermell situada sota la balança per accedir a l'obertura de pesatge inferior.

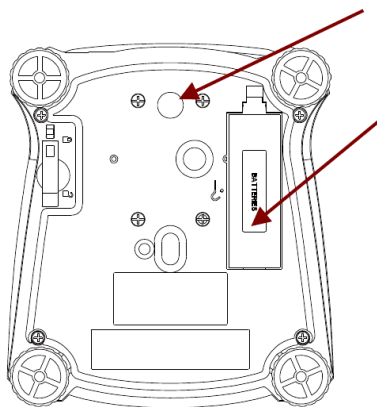

Fletxa superior: tapa protectora per a pesatge penjant. Fletxa inferior: ganxo per a pesatge penjant.

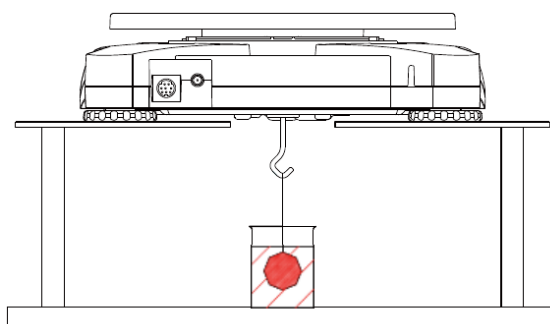

Disposició del pesatge penjant per sota de la balança.

10. Compliment



El compliment de les normes següents s'indica mitjançant el marcatge corresponent al producte.

Marca	Estàndard
CE	Aquest producte compleix les directives de la UE 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) i 2014/31/EU (NAWI). Consulteu la Declaració de Conformitat de la UE a la documentació de l'equip.
WEEE	Aquest producte compleix la directiva de la UE 2002/96/EC (WEEE). Elimineu el producte d'acord amb les normatives locals al punt de recollida indicat per als equips elèctrics i electrònics. Per a les instruccions d'eliminació a Europa, consulteu la documentació de l'equip.
RCM	AS/NZS 61000.6.1 i AS/NZS 61000.6.3.
CSA	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 i UL Std. No. 61010-1.

11. Documentació addicional

Per obtenir informació més detallada sobre la balança, consulteu el manual d'instruccions del producte.

La declaració UE de conformitat original del fabricant, P/N 30308439 E de 15/08/2023, es facilita com a document separat. El seu abast correspon únicament als models que hi figuren.