

MANUAL D'USUARI TECNIPÉS

Valor 4000W

Guia d'usuari · Bàscales Valor 4000W.



1. Informació de seguretat

Indicació	Significat
ADVERTIMENT	Situació perillosa amb risc mitjà que, si no s'evita, pot provocar lesions o la mort.
PRECAUCIÓ	Situació perillosa amb risc baix que, si no s'evita, pot provocar danys a l'equip o a la propietat, pèrdua de dades o lesions.
Atenció	Informació important sobre el producte.
Nota	Informació útil sobre el producte.

Símbols d'advertiment



Perill general.



Descàrrega elèctrica.

Precaucions de seguretat



PRECAUCIÓ: Llegiu tots els advertiments de seguretat abans d'instal·lar, fer connexions o fer manteniment en aquest equip. L'incompliment d'aquests advertiments pot provocar lesions personals i/o danys a la propietat. Conserveu totes les instruccions per a futures consultes.

- Comproveu que la tensió de la xarxa local de CA sigui dins del rang d'entrada indicat a l'etiqueta de l'adaptador de CA.
- Connecteu l'adaptador de CA únicament a una presa compatible amb connexió de terra.
- Col·loqueu l'instrument de manera que l'adaptador de CA es pugui desconnectar fàcilment de la presa.
- Col·loqueu el cable d'alimentació de manera que no sigui un obstacle ni un perill d'ensopegada.
- Utilitzeu l'equip únicament en les condicions ambientals especificades a les instruccions d'ús.
- No utilitzeu l'equip en entorns perillosos o explosius.
- Desconnecteu l'equip de la xarxa elèctrica abans de netejar-lo o fer-hi manteniment.
- Només el personal autoritzat pot fer el manteniment.

Ús previst

Utilitzeu l'instrument exclusivament per pesar, tal com es descriu a les instruccions d'ús. Qualsevol altre ús o funcionament fora dels límits de les especificacions tècniques sense autorització escrita del fabricant es considera un ús no previst.

Aquest instrument compleix els estàndards industrials actuals i les normes de seguretat reconegudes; tot i això, pot constituir un perill durant l'ús.


Si no s'utilitza d'acord amb aquestes instruccions, la protecció prevista pot quedar compromesa i el fabricant no assumeix responsabilitat.

2. Instal·lació · 2.1 Selecció del lloc

La superfície ha de ser ferma, plana i anivellada. Eviteu llocs amb corrents d'aire excessius, vibracions, fonts de calor o canvis ràpids de temperatura. Deixeu prou espai al voltant de l'instrument.


2.2 Instal·lació de components

Col·loqueu el plat d'acer inoxidable sobre la plataforma de pesatge abans d'engegar la bàscula.

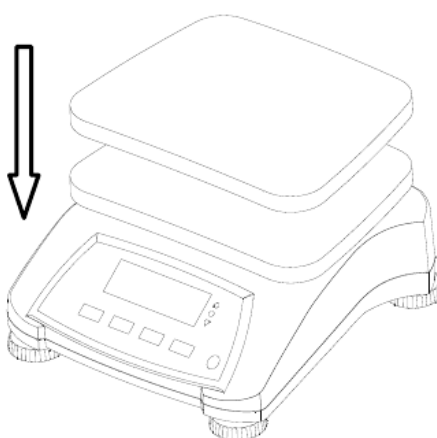

2.3 Connexió de l'alimentació

Instal·lació de l'adaptador de CA. Connecteu el cable d'alimentació de l'adaptador de CA al connector d'entrada de l'instrument i, a continuació, connecteu l'endoll de CA a una presa adequada.

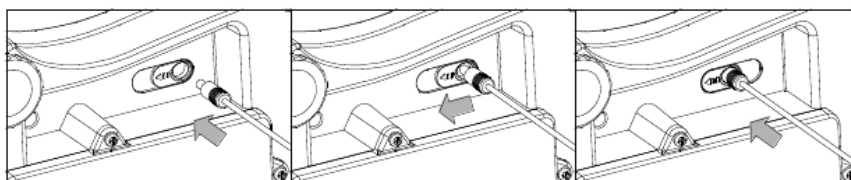


Atenció: utilitzeu únicament un adaptador de CA especificat pel fabricant.

Bateria recarregable

Deixeu carregar la bateria durant 12 hores abans d'utilitzar la bàscula amb bateria. L'instrument es pot utilitzar durant la càrrega i la bateria està protegida contra sobrecàrregues. Per obtenir el màxim temps de funcionament, carregueu la bateria a temperatura ambient.

2.4 Anivellament de l'instrument

Ajusteu les potes o la roda d'anivellament fins que la bombolla quedi centrada al cercle de l'indicador de nivell. Comproveu l'anivellament cada vegada que canvieu la ubicació de l'equip.

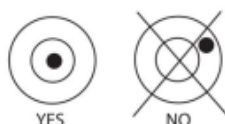


Bombolla centrada: sí. Bombolla fora del centre: no.


2.5 Calibratge inicial

El calibratge, l'ajust i la configuració tècnica d'aquest equip els fa el servei tècnic de TecnIPés. Contacteu amb nosaltres per telèfon al 93 531 80 74 o per WhatsApp al 648 907 518.

3. Funcionament · 3.1 Panell de control

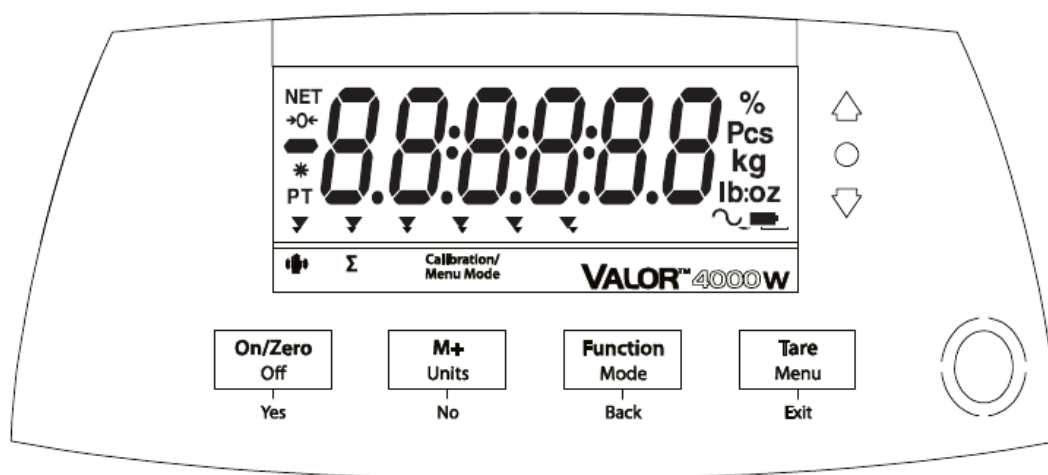


Botó On/Zero · Off · Yes

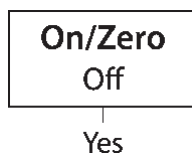


- Pulsació breu, engegada: posa la pantalla a zero.
- Pulsació breu, apagada: engega la bàscula.
- Pulsació llarga, engegada: apaga la bàscula.
- Pulsació breu al menú: selecciona o accepta l'ajust mostrat.

Botó M+ · Units · No

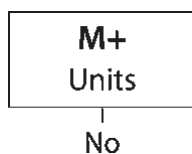


- Pulsació breu: acumula el pes o mostra la informació acumulada amb càrrega zero.
- Pulsació llarga: alterna entre les unitats actives.
- Pulsació breu al menú: alterna entre els ajustos disponibles.

Botó Function · Mode · Back

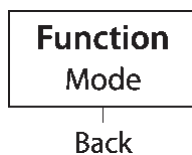

- Pulsació breu: inicia la resposta específica del mode d'aplicació.
- Pulsació llarga: selecciona el mode actiu.
- Pulsació breu al menú: torna als ajustos anteriors.

Botó Tare · Menu · Exit

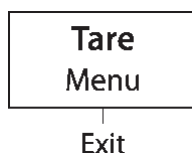

- Pulsació breu: introdueix o esborra un valor de tara.
- Pulsació llarga: accedeix al menú d'usuari.
- Pulsació breu al menú: surt ràpidament del menú d'usuari.

Sensor IR




El sensor IR es pot programar com un botó sense contacte. Consulteu l'apartat 4.3 del menú d'usuari del manual d'instruccions per conèixer els ajustos disponibles.

Notes de funcionament

- Pulsació breu: menys de 2,5 segons.
- Pulsació llarga: mantenir premut més de 2,5 segons.
- El sensor IR es pot activar amb la mà o un altre objecte col·locat a l'altura especificada respecte del sensor; consulteu l'apartat 4.3 del manual d'instruccions. La distància d'activació varia segons la naturalesa reflectora de l'objecte. Si es produeixen activacions no desitjades en situacions particulars, el sensor es pot desactivar.

3.2 Pantalla

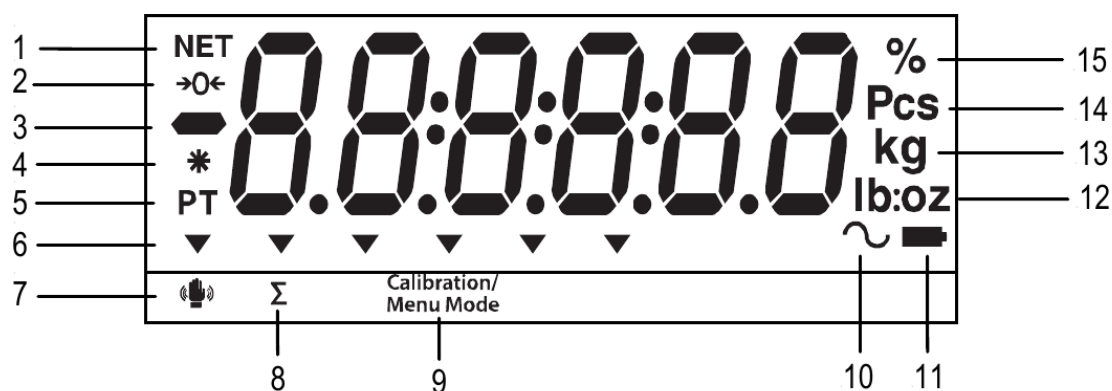

Símbols de la pantalla

* No utilitzat.

Número	Descripció
1	NET
2	Centre de zero
3	Negatiu
4	Pes estable
5	Tara preseleccionada*
6	Punters
7	Sensor IR
8	Acumulació
9	Calibratge / mode menú
10	Dinàmic*
11	Càrrega de bateria
12	Lliura, unça, lliura:unça
13	Gram, quilogram
14	Peces*
15	Percentatge

Pantalla posterior



Rear display.

IR Sensor: sensor d'infrarojos. LED Indicators: indicadors LED. Rear display: pantalla posterior.

Els indicadors LED de colors de la dreta dels panells s'utilitzen en el mode de comprovació de pes; consulteu l'apartat 3.6 del manual d'instruccions. S'encenen segons aquestes regles:



Indicador	Condició
Vermell · fletxa superior	Càrrega > límit superior
Verd · cercle	Càrrega $\geq$ límit inferior i $\leq$ límit superior
Groc · fletxa inferior	Càrrega < límit inferior

3.3 Ús de l'instrument · Pesatge

1. Manteniu premut Mode fins que aparegui [wJelGH] (pesatge).
2. Si cal, col·loqueu un recipient buit al plat i premeu Tare.
3. Afegiu la mostra al plat o al recipient. La pantalla mostra el pes de la mostra.

4. Manteniment · 4.1 Neteja



ADVERTIMENT: perill de descàrrega elèctrica. Desconnecteu l'equip de l'alimentació abans de netejar-lo. Assegureu-vos que no entri cap líquid a l'interior de l'instrument.

Atenció: no utilitzeu dissolvents, productes químics agressius, amoníac ni netejadors abrasius.

Les superfícies exteriors es poden netejar amb un drap humitejat amb aigua i un detergent suau.

4.2 Resolució de problemes

Per a problemes tècnics, contacteu amb un servei tècnic autoritzat pel fabricant.

5. Dades tècniques · Condicions d'ús

Les dades tècniques són vàlides en les condicions següents:

Condicció	Valor
Ús	Només en interiors
Temperatura de funcionament	De -10 °C a 40 °C
Humitat relativa	10 % a 90 %, sense condensació
Altitud	Fins a 2000 m
Alimentació	Adaptador de CA subministrat: sortida 12 V DC, 0,84 A; bateria interna recarregable segellada de plom-àcid
Variacions de la tensió de xarxa	Fins a ± 10 % de la tensió nominal
Categoria d'instal·lació	II
Grau de contaminació	2

Especificacions per model

d: lectura de les versions no homologades. e: lectura de les versions homologades. Els models de cada parella comparteixen la columna corresponent en aquesta guia.

Característica	V41PWE1501T / V41XWE1501T	V41PWE3T / V41XWE3T	V41PWE6T / V41XWE6T	V41PWE15T / V41XWE15T
Capacitat × lectura (d), kg	1,5 kg × 0,0002 kg	3 kg × 0,0005 kg	6 kg × 0,001 kg	15 kg × 0,002 kg
Capacitat × lectura (d), g	1500 g × 0,2 g	3000 g × 0,5 g	6000 g × 1 g	15000 g × 2 g
Capacitat × lectura (d), lb	3 lb × 0,0005 lb	6 lb × 0,001 lb	15 lb × 0,002 lb	30 lb × 0,005 lb
Capacitat × lectura (d), oz	48 oz × 0,01 oz	96 oz × 0,02 oz	240 oz × 0,05 oz	480 oz × 0,1 oz
Resolució màxima mostrada	7500	6000	6000	7500
Capacitat × lectura (e), kg	1,5 kg × 0,0005 kg	3 kg × 0,001 kg	6 kg × 0,002 kg	15 kg × 0,005 kg
Capacitat × lectura (e), g	1500 g × 0,5 g	3000 g × 1 g	6000 g × 2 g	15000 g × 5 g
Capacitat × lectura (e), lb	3 lb × 0,001 lb	6 lb × 0,002 lb	15 lb × 0,005 lb	30 lb × 0,01 lb
Capacitat × lectura (e), oz	48 oz × 0,02 oz	96 oz × 0,05 oz	240 oz × 0,1 oz	480 oz × 0,2 oz
Resolució homologada	3000	3000	3000	3000
Repetibilitat	0,0005 kg	0,001 kg	0,002 kg	0,005 kg
Linealitat	±0,0005 kg	±0,001 kg	±0,002 kg	±0,005 kg

6. Conformitat

El compliment de les normes següents s'indica mitjançant el marcatge corresponent al producte.

Marcatge CE



Aquest producte compleix les directives de la UE 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) i 2014/31/EU (NAWI).
Consulteu la Declaració de Conformitat de la UE corresponent a l'equip.

Residus d'aparells elèctrics i electrònics



Aquest producte compleix la directiva de la UE 2002/96/EC (WEEE). Elimineu el producte segons la normativa local al punt de recollida indicat per a equips elèctrics i electrònics. Per a les instruccions d'eliminació, consulteu la documentació de l'equip.

Instruments de pesatge verificats

Quan s'utilitza l'instrument en el comerç o en una aplicació sotmesa a control legal, s'ha de configurar, verificar i precintar d'acord amb la normativa local de pesos i mesures. És responsabilitat del comprador assegurar-se que es compleixen tots els requisits legals pertinents.

Els instruments verificats al lloc de fabricació porten el marcatge metrològic adicional següent a la placa de característiques:



Els instruments que s'han de verificar en dues etapes no porten el marcatge metrològic adicional a la placa de característiques. La segona etapa d'avaluació de conformitat l'ha de fer l'autoritat competent en pesos i mesures.

Si la normativa nacional limita la validesa de la verificació, l'usuari ha de respectar estrictament el període de reverificació i informar l'autoritat competent.

Com que els requisits varien entre jurisdiccions, el comprador ha de consultar amb la seva oficina local de pesos i mesures si no els coneix.